



BRUKSANVISNING



Joëlette®
FINISHER

tlf 0047 97111880, mail: olemorten@sitski.no, web: www.sitski.no

C10P159-C10P164 . Rev B . 29-03-2024.

Denne bruksanvisningen MÅ gis til brukeren av dette produktet. Les denne bruksanvisningen FØR produktet tas i bruk, og ta vare på den til senere.
Informasjonen i dette dokumentet er uforpliktende og kan endres uten forvarsel.
Fotografiene som vises i denne bruksanvisningen, er ikke forpliktende.

INNLEDNING.....	4
BRUK	4
GARANTI	5
JOËLETTE FINISHER	5
GENERELL INFORMASJON	5
<u>SJÅFØREN.....</u>	<u>5</u>
<u>HVORDAN BETJENE EN JOËLETTE FINISHER</u>	<u>6</u>
<u>PASSASJEREN</u>	<u>6</u>
<u>SVINGER</u>	<u>6</u>
Å SETTE PASSASJEREN OPP I JOËLETTE FINISHER	7
<u>OVERFØRING.....</u>	<u>7</u>
<u>PASSASJERENS SIKKERHET OG HJELP</u>	<u>7</u>
<u>KOMFORT.....</u>	<u>8</u>
SIKKERHET	9
<u>VALG AV TUR</u>	<u>9</u>
<u>TEAMET</u>	<u>9</u>
<u>FORBEREDELSE TIL TUREN</u>	<u>9</u>
<u>FORSIKRING</u>	<u>9</u>
<u>I SEKKEN</u>	<u>9</u>
<u>UNDER TUREN</u>	<u>10</u>
SPRENGSKISSE AV JOËLETTE FINISHER STR. 42	11
SPRENGSKISSE AV JOËLETTE FINISHER STR. 48	12
MONTERING AV JOËLETTE FINISHER	13
VEDLIKEHOLD	16
VEDLIKEHOLD	16
RENGJØRING	16
DESINFISERING	17
INSPEKSJONSKONTROLLER	17
LAGRING OVER LENGRE TID	18
ETTER BRUK,.....	19
AVHENDING.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
TEKNISKE DATA	19
MONTERING AV HODESTØTTE (VALGFRITT).....	21
KONTAKT.....	23

INNLEDNING

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om håndtering av Joëlette Finisher. For å ivareta sikkerheten ved bruk av produktet, les bruksanvisningen nøye og følg sikkerhetsinstruksjonene.

Hvis du opplever at skriftstørrelsen i den trykte versjonen av brukermanualen er vanskelig å lese, kan du laste ned pdf-en fra nettsiden www.Joëletteandco.com. Pdf-filen kan deretter skaleres på skjermen til en skriftstørrelse som er mer behagelig for deg.



BRUK

Joëlette Finisher skal kun brukes når den er i perfekt stand. Ellers kan du sette deg selv og andre i fare. Følgende liste er ikke uttømmende. Den er kun ment å vise noen av situasjonene som kan påvirke brukervennligheten til Joëlette.

Du bør umiddelbart slutte å bruke Joëlette Finisher hvis brukervennligheten blir begrenset på grunn av:

- skade på bremsesystemet
- for lavt dekktrykk
- skade på beltet og holdesystemet (brystsele)
- kabler som er skadet, bøyd, klemmt eller har løsnet fra festet
- manglende sikkerhetsstifter
- uvanlige lyder som utvikles eller oppstår

GARANTI

Joëlette Finisher har to års garanti. Joëlette Finisher må brukes i samsvar med tiltenkt bruk, vedlikehold og servicekrav som er angitt i dette dokumentet. Utilstrekkelig vedlikehold medfører fare for ulykke og bortfall av garanti (side 16). Tilgjengeligheten av reservedeler er begrenset til **5 år**.

Av sikkerhetshensyn og for å unngå ulykker som skyldes ubemerket slitasje, er det viktig at Joëlette gjennomgår en flerårig inspeksjon og minimum én gang hvert år under normale driftsforhold. Under vanlige driftsforhold vil det være hensiktsmessig å foreta mellomkontroller av bremses, tilbehør og understell.

Hvis det oppstår en funksjonsfeil på din Joëlette, skal du ikke gjør egne inngrep. Dette kan medføre fare for å miste garantien. Kontakt oss. Enhver skade eller feil som skyldes manglende overholdelse av denne håndboken eller dårlig vedlikehold, fører til bortfall av garanti. Ikke prøv å utføre noen form for arbeid eller endringer som ikke er beskrevet her.

JOËLETTE FINISHER

Joëlette Finisher er en trehjuls rullestol som kan brukes av bevegelseshemmede, ved hjelp av en funksjonsdyktig ledsager, for kjøring i slakt terreng (sykkelstier, veier osv.).

De tre hjulene sørger for stabilitet og manøvrerbarhet under kjøring. Ved hjelp av et styre/håndtak på baksiden kan Joëlette Finisher styres av ledsageren.

Joëlette Finisher kan tilpasses etter de fysiske egenskapene og kjøreferdighetene til hver enkelt bruker over alle kjøreavstander. Den er beregnet for et bredt spekter av brukere med ulike behov.

Det finnes to modeller med forskjellige setebredder (størrelse 48 og 42). Alle instruksjonene gjelder for begge størrelser. Ledsagerne som hjelper brukeren med Joëlette Finisher, har fullt ansvar for bruken av produktet.

GENERELL INFORMASJON

SJÅFØREN

Å kjøre Joëlette Finisher krever kun én sjåfør, som dytter via de bakre håndtakene. Ved behov kan flere ledsagere bli med og overta kjøringen etter hvert. For å skifte sjåfør på mest mulig forsvarlig vis må Joëlette Finisher først stanses. Dette gjøres med bremsen, og deretter parkeringsbryteren.

ADVARSEL

Joëlette Finisher egner seg ikke for ulendt terreng.

Enhver alvorlig hendelse knyttet til bruken av Joëlette Finisher må rapporteres til produsenten.

KUN FOR FRITIDSAKTIVITETER.



HVORDAN BETJENE EN JOËLETTE FINISHER

Å kjøre Joëlette Finisher stiller høye krav til fysisk form, for å sikre at passasjerene er sikre mens maskinen er i bevegelse.

Imidlertid er det ikke bare ment for «store idrettsutøvere». Den kan også brukes i «joggemodus» på enklere ruter.

Å kjøre Joëlette Finisher er en teknisk krevende jobb som krever opplæring. For at kjørestillingen skal være mest mulig behagelig, bør håndtakene plasseres på nivå med bekkenet.

PASSASJEREN

Passasjerene føler alt når de sitter på Joëlette Finisher! Hvis de opplever ubehag, må de gi beskjed til ledsageren. Å kjøre en Joëlette Finisher er ikke et ubetydelig skritt for en person med funksjonsnedsettelse. Det innebærer å gi avkall på den selvstendighet man tidligere har hatt med manuell eller elektrisk rullestol, og være fullstendig prisgitt sine ledsagere for å kunne bevege seg og føle seg trygg!

Også personer med alvorlig nedsatt funksjonsevne kan bruke Joëlette Finisher, ettersom det er mulig å integrere et skall. Det eneste man trenger å gjøre, er å montere dette på de opprinnelige putene ved å plassere skallfestesystemet bak ryggstøtten.

Det finnes mange forskjellige typer funksjonsnedsettelse, og derfor må sjåførene gjøre nødvendige tilpasninger (stropper, puter, skum osv.) på forhånd for å sikre at alle har det behagelig.

Joëlette Finisher tåler en vekt på 100 kilo i størrelse 48, og 80 kg i størrelse 42. Av hensyn til sikkerhet bør vekten til passasjerene ikke vesentlig overstige vekten til den bakerste sjåføren (justeres i henhold til teamets kapasitet såvel som løypens vanskelighetsgrad).

SVINGER

Forhjulet på Joëlette Finisher styrer retningen. Om det er for mange svinger i løypen, er det imidlertid nødvendig å lene seg på det bakre styret for å heve forhjulet litt opp fra bakken. **Det er viktig å følge godt med, spesielt når man kjører i høy hastighet.**



Å SETTE PASSASJEREN OPP PÅ JOËLETTE FINISHER

OVERFØRING

Å sette passasjerer over på Joëlette Finisher er forholdsvis enkelt, da setet er på vanlig rullestolhøyde.

Påse at Joëlette Finisher er plassert fullstendig stabilt. Parkeringsbremsen må være aktivert. Ledsageren hjelper passasjerer opp i setet.

- Ett av de to armlenene foran kan trekkes inn for uavhengig sideveis overføring fra rullestolen til Joëlette Finisher.
- Hvis passasjerer ikke kan komme opp i setet på egen hånd, vil ledsagerne hjelpe ved å plassere seg på den ene siden av Joëlette og løfte passasjerer opp i setet.

En vanlig bæreteknikk er at pleiere legger sin egen nakke under armhulen til passasjerer, med den ene hånden bak ryggen for å holde beltet, og den andre hånden under knærne, og løfter deretter sammen. Det finnes også andre måter å løfte passasjerer på, blant annet bruk av heis.

Hvis passasjerer er i et skall, kan han/hun overføres med skallet til Joëlette Finisher. Dette gjøres ved å posisjonere skallet på seteputene og bruke skallets opprinnelige festesystem.

Husk uansett å ta det med ro når du løfter personen: bær ved å bøye bena.

Sørg også for at overføringsteknikken er egnet for den aktuelle personen. Ikke vær redd for å spørre om råd: han/hun kjenner sin funksjonsnedsettelse best og vil kunne fortelle deg hva slags hjelp han/hun trenger og hva som ikke passer.

PASSASJERENS SIKKERHET OG HJELP

- Husk å feste brystplaten før hver kjøretur. Vær nøye med å plassere den riktig på passasjerer (ingen vridning, klær under, ikke for stramt) for ikke å skape ubehag.
- Juster høyden på fotstøttene med den medfølgende 3 mm sekskantnøkkelen for å skru fotstøttene i en av de tre posisjonene. Stram skruene godt til.

FORSIKTIG

Det bakre styret må alltid justeres når Joëlette Finisher står stille. Hvis du går, er det fare for å velte bakover.



C10P159-C10P164 - Rev B - 29-03-2024.



- Fest føttene til fotstøttene ved hjelp av borrelåsbåndene som følger med.
- Bruk knappen for å stille hodestøtten i riktig høyde (slik at den hviler mot baksiden av brukerens nakke). Hvis hodestøtten er i feil posisjon, kan en kollisjon føre til nakkesleng. Stram til håndtaket etter at hodestøtten er justert.

KOMFORT

Sørg for at passasjerens har det mest mulig komfortabelt helt fra begynnelsen:

- Ved å justere fotstøtten og hodestøtten etter behov. Helningen på ryggstøtten kan også justeres ved hjelp av de hurtigutløsende håndtakene på hver side av setet (fra 100° til 111°). - Sørg for at passasjerens klær og lemmer er riktig plassert (de kan ha blitt forskjøvet under overføringen).
- Vær oppmerksom på risikoen for skade hvis en gjenstand (lem, klesplagg osv.) kommer i kontakt med bevegelige deler.
- Påse at ingen stropper kan sette seg fast i hjulene eller andre bevegelige deler.

Her er det grunnleggende om å kjøre en Joëlette. Det er opp til deg å eksperimentere og tilpasse løypen etter dine evner.

Fremfor alt, husk at prioriteringen er å sikre passasjerens komfort og sikkerhet, mens dere har det gøy!



SIKKERHET

VALG AV TUR

Før dere legger ut på tur med Joëlette Finisher, må dere nøye planlegge ruten som skal følges. Joëlette Finisher egner seg kun på jevnt, flatt terreng (sykkelveier, asfalt, grønne veier, skogsstier osv.).

TEAMET

- Det kreves bare én person for å kjøre Joëlette Finisher. Andre ledsagere kan overta kjøringen, avhengig av løypens vanskelighetsgrad, sjåførenes erfaring og passasjerens vekt.
- Ledsagere som fysisk er i stand til å kjøre Joëlette Finisher.
- Vær forsiktig så du ikke overvurderer de fysiske og tekniske egenskapene til ledsagerne.

FORBEREDELSE TIL TUREN

- Planlegg kjøreruten på forhånd.
- Velg rute i henhold til teamets fysiske og tekniske egenskaper.
- Forsikre deg om at Joëlette Finisher er i god stand. Mekanisk kontroll før turen.
- Sjekk værmeldingen. Hvis det er fare for tordenvær, må turen utsettes (på grunn av metallkonstruksjonen tiltrekker Joëlette Finisher lyn). Vær også oppmerksom på at en rute som er gjennomførbart i fint vær, kan bli ekstremt utfordrende i vått vær.
- Fortell andre om hvilken rute dere planlegger å ta.

FORSIKRING

Det er obligatorisk for hver ledsager å ha en ansvarsforsikring. Bruk av Joëlette Finisher krever ikke en spesifikk forsikring, men du bør informere forsikringsselskapet om dette.

I SEKKEN


- Vanlig løpeutstyr (førstehjelpsskrin, vann og proviant, nødvendige klesplagg osv.).
- Mobiltelefon for å ringe etter hjelp i nødstilfeller (europeisk nødnummer 112 eller nummeret til PGHM i området).

- Reparasjonsutstyr for Joëlette (relevant verktøy, reserveør eller spray til hjulene, o.l.), utstyr i tilfelle havari (stropper, spennskruer osv.).
- For passasjerer, som lett kan bli utsatt for kulde, ta med varme klær. Ikke glem å beskytte hender og hode (hansker, lue osv.), og eventuelt et beskyttelsestreck mot sterk kulde. Husk regnbeskyttelse av typen poncho, som også kan brukes til å beskytte passasjerer og Joëlette Finisher (puter, hodestøtter osv.).


UNDER TUREN

- Passasjerer må bruke sykkelhjelmer.
- Sjåføren av Joëlette Finisher må bruke gode sko.
- Juster høyden på det bakre styret slik at det ikke er over bekkenhøyde.
- Ikke kjør Joëlette Finisher hvis du føler deg søvnig. Det er viktig å kjenne og respektere sine egne grenser.
- Forsikre deg om at det ikke er noen fare for at stropper eller klesplagg kan sette seg fast i de roterende delene.
- Ikke kjør for fort: Du må vite hvor hjulet beveger seg og hvor føttene dine er, og unngå å skli eller snuble.
- I kaldt vær, sørg for at passasjerer ikke risikerer nedsatt kroppstemperatur fra å sitte stille over lengre tid, eller på grunn av patologiske forhold (sirkulasjonsproblemer, tap av følsomhet som gjør at man ikke føler kulde, osv.).
- Ikke sett fra deg en Joëlette Finisher med parkeringsbremsen på, uten at noen står bak og passer på, spesielt hvis passasjerer har ukontrollerte bevegelser.
- Unngå å falle på krevende strekninger, nær kløfter eller på glatt underlag!
- Husk imidlertid at de fleste fall ikke skjer på krevende strekninger, men på stille, flate strekninger fordi man mister oppmerksomheten.
- Pass på at dere ikke kommer for nær ild, da stoffet kan ta fyr.
- Det anbefales at passasjerer reiser seg og/eller skifter stilling minst annenhver time for å begrense risikoen for trykksår (haleben, seteben, ryggmarg).
- Sørg for at de delene av Joëlette Finisher som kommer i kontakt med passasjerens hud, ikke blir for varme (noe som kan føre til brannskader).


SPRENGSKISSE AV JOËLETTE FINISHER STR. 42

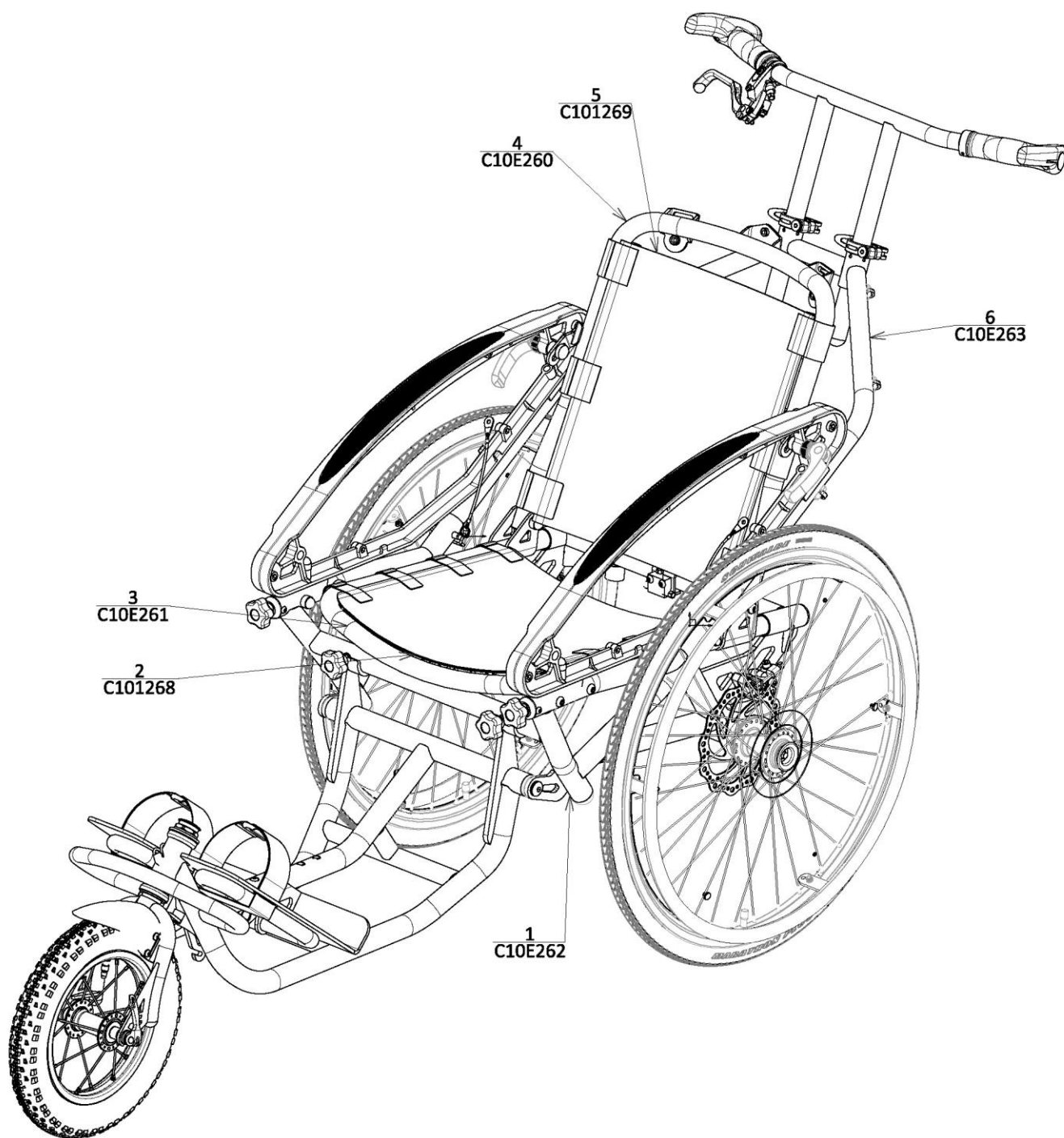

SPRENGSKISSE AV JOËLETTE FINISHER STR. 48

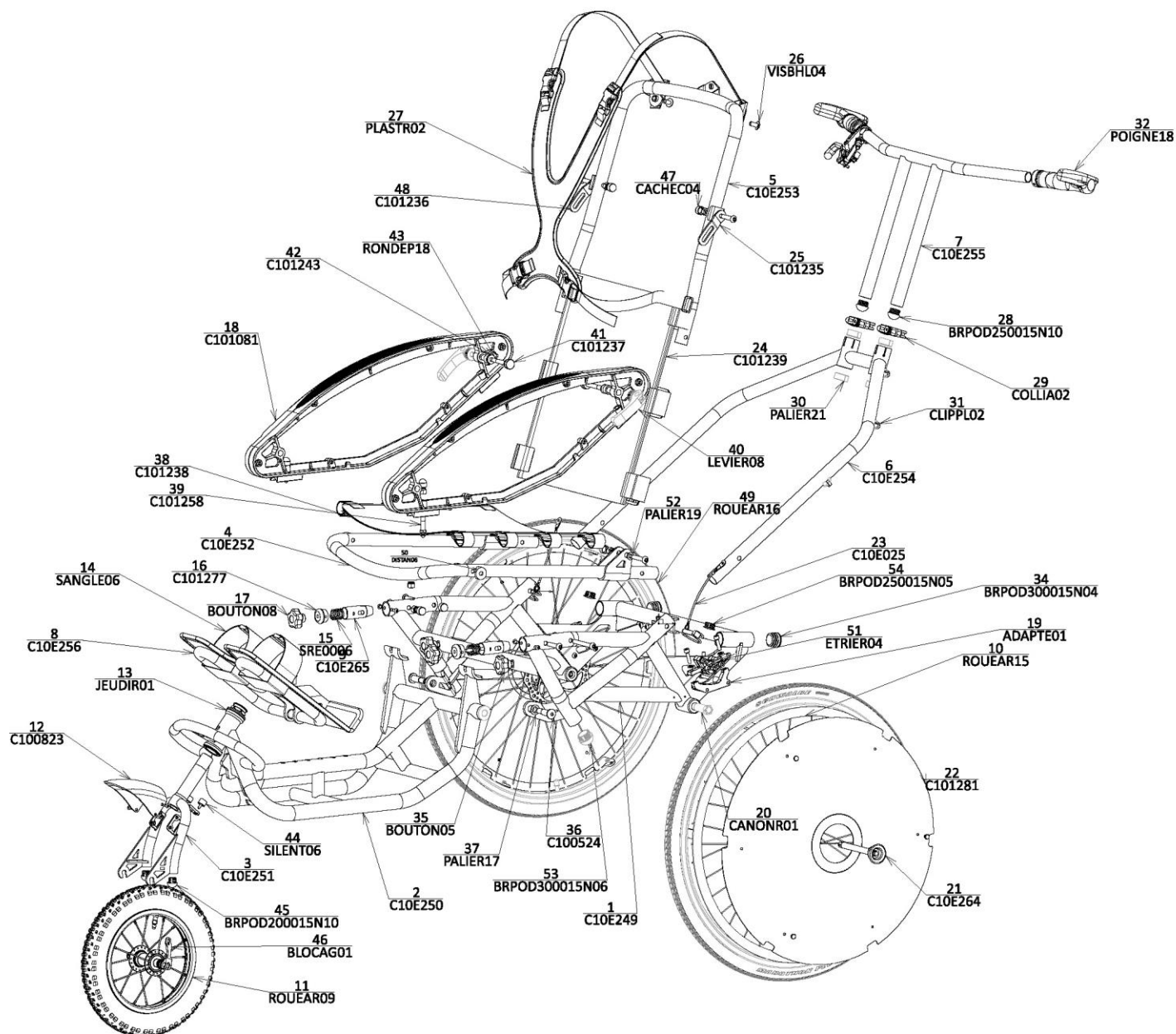


MONTERING AV JOËLETTE FINISHER

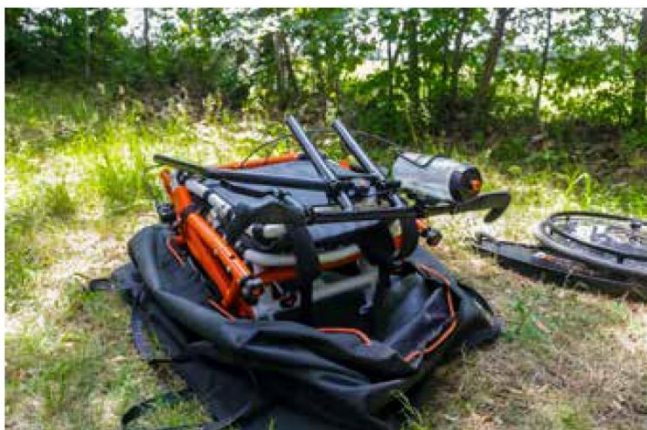


1. Ta Joëlette Finisher ut av posen (valgfritt) og sett den på bakken med håndtakene vendt oppover.



2. Grip håndtakene og plasser dem i dekslet.

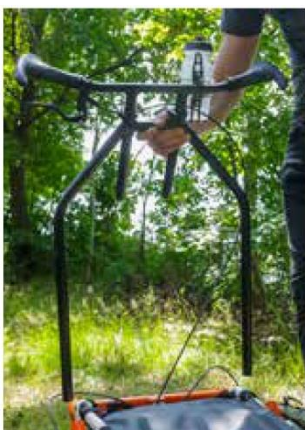

3. Fjern de to sikkerhetsstiftene. De to armene på styret skal deretter settes inn i hylsen på chassiset. Til slutt skal sikkerhetsstiftene byttes ut.

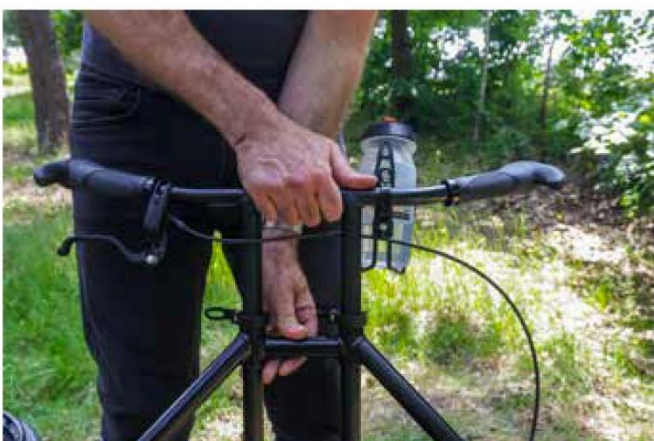



4. For å justere styrets høyde, løsne de hurtigutløsende spakene på styret.



5. Stram deretter spakene på nytt.



6. Vipp fotstøtten forover så langt det er mulig (unngå å klemme fingre/hender).

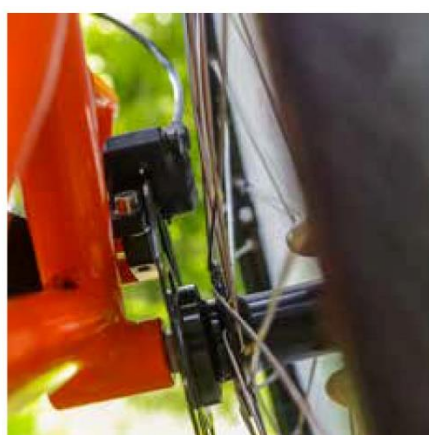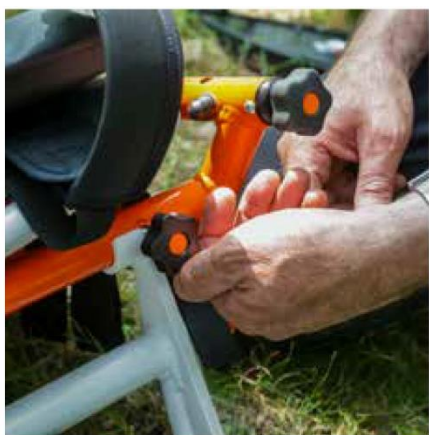

7. Lås fotstøtten med knappene.

8. Sett inn skiven til hvert hjul mellom bremseklossene.

9. Sett inn kuleleddets spindler til de låser seg (sjekk at de låses ved å trekke i hjulet).



10. Løft opp ryggstøtten.



11. Sett fronten av armlenet inn i rammen.



12. Lås hvert armlene ved å stramme knottene.



13. Skru ut de riflede stiftene på armlenet.



14. Monter disse stiftene i ryggplatene og skru inn i hurtigutløerspaken.



15. Vipp hurtigutløerspaken når du har valgt vinkel for ryggstøtte.



16. Sett forhjulet inn i gaffelen.



17. Deretter strammer du den med hurtigutløerspaken.

For å demontere, utfør samme prosedyre i motsatt rekkefølge. Vær forsiktig så du ikke klemmer hender eller fingre i bevegelige deler.

Ved demontering/bøying, pass på at du ikke klemmer eller bøyer bremseslangen(e).

En video er tilgjengelig på nettsiden vår

www.joëletteandco.com

VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD

Begrepet «vedlikehold» refererer til enhver aktivitet som holder Joëlette Finisher i god stand og sikrer at den er egnet til bruk. Vedlikehold omfatter ulike områder som regelmessig rengjøring, inspeksjon, reparasjon og generell service.

Dette bør gjøres minst én gang i året uavhengig av hvor ofte den blir brukt. Hvis utstyret brukes hyppig (flere ganger i uken), kreves ytterligere en service.

Vedlikehold omfatter kontroll av:

- dekktrykk
- at bremsesystemet fungerer som det skal, spesielt bremseklossbeleggene En bremsepak som er litt «myk», gir ikke optimal bremsing. Spaken må ikke stanse på det bakre styret før bremsingen er på sitt maksimale.
- tilstedeværelsen av sikkerhetsstifter
- Hvis styret er «svampaktig» selv om foringene er nye eller i god stand, skal du kontrollere og etterfylle væskenivået i hovedbremsesynderen om nødvendig. Bremsevæske er tilgjengelig i alle sykkelbutikker.
- Sjekk at det ikke er væskelekkasje fra slangen ved bremsepakken eller kaliperen. Om det er lekkasje eller trykktap, kontakt en spesialist.
- Hvis du må jobbe med det hydrauliske bremsesystemet, spesielt ved bytte av bremseklosser, kan vi levere et systemavlufningssett.
- Du finner røde, gule eller svarte plastskiver mellom bremseklossene. Disse skal settes inn mellom de to klossene hvis de to bakhjulene fjernes, samt hver gang Joëlette Finisher legges sammen.
- Vi anbefaler at du alltid har punkteringsspray på hver Joëlette Finisher.

Vi anbefaler på det sterkeste at vedlikehold utføres av en fagperson.

RENGJØRING

Når du rengjør Joëlette Finisher, vær oppmerksom på følgende punkter:

- Bruk kun en fuktig klut og et mildt, hud- og allergivennlig rengjøringsmiddel.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk høytrykkspyler.
- Ettersom putetrekkene er laget av PVC-folie, kan man enkelt rengjøre overflaten.

DESINFISERING

Det er tillatt å desinfisere ved hjelp av testede og godkjente desinfeksjonsprodukter på en fuktig klut eller ved å spraye. En liste over desinfeksjonsmidler som i dag er godkjent for rengjøring med fuktig klut eller spray, er tilgjengelig på nettsiden til Robert Koch Institute på <http://www.rki.de>.

Vi anbefaler å desinfisere Joëlette Finisher hver gang før bruk, og i det minste mellom hver nye passasjer, for å unngå krysskontaminering.

INSPEKSJONSKONTROLLER

Følgende tabeller gir en liste over inspeksjoner som brukeren bør utføre ved passende tidsintervaller.

Før hver bruk av Joëlette Finisher

ELEMENTER	INSPEKSJONSKONTROLLE R	VED FEIL
SETELÅSSYSTEM	Forsikre deg om at strammeknottene på fremre ramme fungerer ordentlig.	Kontakt oss
DEKK	Pass på at dekkene ikke er skadet og at det ikke er noen lekkasje ved oppblåsingsventilen.	Kontakt oss eller ta kontakt med en forhandler av sykkelutstyr.
	Sørg for at dekket er pumpet til riktig trykk.	Pumping av dekk. Se hoveddekktabellen for hovedhjul i kapittelet «Tekniske data». For å reparere innerrøret, kontakt oss eller en sykkelforhandler.
SIKKERHETSSTIFTER OG STIFTER	Kontroller at sikkerhetsstiftene som støtter styret, fremdeles er på plass. Vi anbefaler at sikkerhetsstiftene og beta-stiftene byttes ut hvert 5. år.	Kontakt oss
HOLDEINNRETNING	Pass på at låsespennene fungerer som de skal. Sjekk at det ikke er skader på sømmene eller surringskarabinene.	Kontakt oss
BREMSING	Sørg for at bremsen fungerer.	Kontakt oss
	Sjekk at spaken på styret er stram.	Stram spaken på nytt.
	Sjekk at bremseslangeløkkene ikke er ødelagte eller løse.	Kontakt oss

Jevnlig

ELEMENTER	INSPEKSJONSKONTROLLE R	VED FEIL
ALLE POLSTREDE DELER	Se om det har oppstått skade eller slitasje i stroppene som fester seteputen og ryggstøtten sammen, og borrelåsstripen som fester ryggstøtten til rammen.	Kontakt oss
BREMSING	Påse at bremseklossene ikke er for slitt.	Kontakt oss eller ta kontakt med en sykkelforhandler.
	Kontroller at bremsevæsknivået i hovedsylinderen er tilstrekkelig høyt.	Kontakt en sykkelforhandler

LAGRING OVER LENGRE TID

Hvis du ikke bruker din Joëlette Finisher over en lengre periode, bør du klargjøre den for lagring. Dermed øker du dens levetid.

Vi anbefaler å oppbevare Joëlette ved en temperatur på 15° C og unngå ekstreme temperaturer.

Komponentene er testet og godkjent for høyere temperaturområder, som beskrevet nedenfor:

- Det tillatte temperaturområdet for lagring av kjøretøyet er -40°C til +65°C.

Oppbevares i et tørt, godt ventilert miljø beskyttet mot ytre påvirkninger.

Blås opp dekket noe.



FARE!

Fare for materiell skade, alvorlig- eller dødelig skade

Feil reparasjon og/eller vedlikehold av Joëlette ved brukere/pleiere eller av ukvalifiserte teknikere, kan føre til materiell skade eller alvorlig personskade, i enkelte tilfeller død.

- **IKKE** utfør andre vedlikeholdsoppgaver enn dem som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Slike reparasjoner og/eller vedlikehold **MÅ** utføres av produsenten eller kompetent personell.

ETTER BRUK,

RESIRKULERING

- Emballasjen til Joëlette Finisher skal resirkuleres.
- Metaldeler resirkuleres som skrapmetall.
- Plastdeler sendes til plastgjenvinning.
- Avfallshåndtering må utføres i henhold til relevante nasjonale lovbestemmelser.

TEKNISKE DATA

Den tekniske informasjonen i dette dokumentet gjelder standardkonfigurasjonen for Joëlette Finisher, eller representerer de teoretiske maksimalverdiene.

Disse egenskapene kan endres hvis tilbehør legges til.

NB: Vær oppmerksom på at i noen tilfeller kan de målte verdiene variere med +/- 10 mm.

TILLATTE FORHOLD OG STEDER FOR BRUK OG LAGRING	
TEMPERATUROMRÅDE FOR BRUK	fra -25°C til +50°C
ANBEFALT LAGRINGSTEMPERATUR	15°C
TEMPERATUROMRÅDE FOR LAGRING	fra 0°C til +50°C

HJUL/ DEKK	
DEKKTYPE	Bakre: 24" x 1" dekk Fremre: 12" x 2" dekk
TRYKK	Maksimalt anbefalt lufttrykk for dekket i bar eller kPa er angitt på innsiden av dekket. Hvis flere verdier er angitt, gjelder den laveste verdien i den tilsvarende enheten.

MÅL	JOËLETTE FINISHER STR. 42 (UTEN HODESTØTTE)	JOËLETTE FINISHER STR. 48 (UTEN HODESTØTTE)
MAKSIMAL SAMLET VEKT	1082 mm	1082 mm
TOTAL BREDDE	648 mm	708 mm
TOTAL LENGDE	1755 mm	1755 mm
RULLENDE SETEHØYDE	470 mm i midten av puten	470 mm i midten av puten
SETEBREDDE	420 mm	480 mm
SETEDYBDE	400 mm	421 mm
MINIMUM SETETYKKELSE	16 mm	16 mm
HØYDE RYGGSTØTTE	420 mm	460 mm
MINIMUM TYKKELSE FOR RYGGSTØTTE	16 mm	16 mm
VINKEL RYGGSTØTTE	100°/111°	100°/111°
SETEVINKEL	8°	8°
ARMLENE HØYDE	280 mm	280 mm
ARMLENE LENGDE	400 mm	400 mm
AVSTAND FOTSTØTTE / SETE	fra 338 mm til 352 mm	fra 338 mm til 352 mm
BAKKEKLARING	150 mm	150 mm
STØRRELSE I SAMMENBRETTET TILSTAND	980 (L) x 620 (B) x 530 (H)	980 (L) x 620 (B) x 530 (H)

	JOËLETTE FINISHER STR. 42 (UTEN HODESTØTTE)	JOËLETTE FINISHER STR. 48 (UTEN HODESTØTTE)
TARA	20 Kg	20 Kg
MAKSIMAL LAST	80 Kg	100 Kg

MONTERING AV HODESTØTTE (VALGFRITT)



1. Fest plastflensen til baksiden av ryggstøtten ved hjelp av de medfølgende skruene.



2. Skru knotten løst på plass.



3. Skyv hodestøtten inn i rommet på baksiden av ryggstøtten.



4. Stram knotten for å sikre hodestøtten.

Unngå å få hender og fingre i klem med bevegelige deler.



Joëlette and Co
by Ferriol-Matrat

Du finner illustrasjoner i denne bruksanvisningen og på produktetiketten:



Samsvarer med de vesentlige kravene i den europeiske lovgivningen som gjelder for produktet



Advarsel: det er viktig å konsultere bruksanvisningen



Vennligst merk: spesielle punkter å være oppmerksom på



Denne merkingen angir at produktet i EU ikke skal avhendes sammen med husholdningsavfall. For å unngå risiko for skade på miljøet eller menneskers helse på grunn av uforsvarlig avhending, må dette produktet resirkuleres på en ansvarlig måte for å oppmuntre til bærekraftig gjenbruk av materialer. For å returnere et brukt produkt, vennligst benytt systemet for retur og innsamling, eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet fra. De vil kunne resirkulere dette produktet på en miljøvennlig måte.



Katalogreferanse



Produsent



ÅÅÅÅYYYY-MM Produksjonsdato (år-måned)



Partinummer



Serienummer

KONTAKT

**TA GJERNE KONTAKT MED JOËLETTE OG TEAMET HVIS DU HAR
SPØRSMÅL**

Sitski Norway as, Imerslundvegen 45, 2323 Ingeberg



www.sitski.no

olemorten@sitski.no



0047 97111880

BLI MED JOËLETES PÅ SOSIALE MEDIER!



@FERRIOL-MATRAT - MED ENERETT

Denne håndboken er beskyttet av loven av 11. mars 1957 om intellektuell eiendom, supplert av loven av 3. juli 1985 samt av alle konvensjoner som gjelder opphavsrett. I henhold til disse lovene og konvensjonene er det ikke tillatt å reprodusere eller kopiere, hverken delvis eller i sin helhet, denne bruksanvisningen, programmene eller systemene uten skriftlig forhåndssamtykke fra FERRIOL-MATRAT. FERRIOL-MATRAT forbeholder seg retten til å revidere og forbedre disse produktene. Denne publikasjonen beskriver tilstanden til produktet på publiseringstidspunktet og tar ikke hensyn til mulige fremtidige endringer.